

SCHEDA TECNICA

CORNER PSS (Primo Soccorso Sanitario)

Codice n. 71


DESCRIZIONE



1,2



3

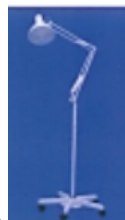

4



5



6

Postazione di Primo Soccorso Sanitario progettata al fine di intervenire immediatamente in caso di incidenti o malori in modo da ridurre le conseguenze dovute a ritardato intervento.

I parametri di progetto utilizzati sono stati rilevati dalle statistiche europee relative alle tipologie di incidenti o malori riscontrati nei vari habitat (luoghi di lavoro, di recreazione e svago, di studio, ecc.) e dalla distribuzione dell'età della popolazione italiana (persone giovani sono più esposte a traumi contusivi, ferite e fratture, ecc.; persone anziane a incidenti cardiovascolari, crisi ipertensive, lipotimie, ecc.)

Il Progetto PSS si rivolge alle Comunità (p.e.: uffici, scuole, centri commerciali, supermercati, stabilimenti balneari, campeggi, istituti religiosi, chiese, alberghi, palestre, ecc..) e si basa su due pilastri (sistema progettato ad hoc e corso di formazione per gli operatori).

La Postazione è composta da:

1. Lettino da visita,
2. Supporto per rotolo di carta copri lettino
3. Armadietto sanitario completo di 30 prodotti / presidi medici
4. Lampada di ispezione a stativo
5. Barella pieghevole
6. Quadro didattico con guida al pronto soccorso

DETTAGLI TECNICI

1,2 Lettino con supporto:

Struttura portante in tubolare di acciaio con gambe smontabili, alza testa e portarotolo. Piano di visita rivestito in poliuretano ricoperto in peltex.

3 Armadietto sanitario (LxAxP 53 x 150 x 36 cm):

Monoblocco realizzato in lamiera verniciata a fuoco, una anta, tre ripiani, serratura di sicurezza, 30 articoli sanitari per il trattamento delle patologie più ricorrenti, predisposizione per fissaggio a muro.

4 Lampada di ispezione (A 98 cm):

Braccio in acciaio, movimento a pantografo bilanciato montato su stativo, lampada ad incandescenza

5 Barella pieghevole

Realizzata con tubi di alluminio (d 30 mm), snodi ed appoggi. Ingombro ripiegata: (LxAxP 20 x 100 x 18 cm).

6 Quadro guida al pronto soccorso:

Realizzato in materiale plastico predisposto per esser appeso completo di spazi per annotare i numeri di emergenza

ACCESSORI A RICHIESTA

Defibrillatore semiautomatico

AVVERTENZE

Il Corner PSS è destinato al trattamento delle emergenze sanitarie.

Deve esser utilizzato solo da parte di personale qualificato.

Conservare in condizioni tali da prevenirne il deterioramento, possibilmente in ambiente chiuso, all'asciutto ed evitando temperature sotto -10 °C o sopra +50 °C.

Custodire fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Controllare prima dell'uso che il materiale sanitario non sia scaduto.

Controllare prima dell'uso della barella che non siano presenti crepe, fessurazioni, cambiamenti di colore, rotture od altre indicazioni di un deterioramento.

Prevedere segnaletica che indica l'ubicazione del Corner PSS

Rev. Gennaio 2019

Informare I Medici Commercial Srl – Via Nazario Sauro n. 4 -00195 Roma

Telefono: 00 39 06 397 229 40



NORME COGENTI

Sistema: Direttive UE sulla tutela e i diritti dei cittadini

Lampada: Prescrizioni marchio CE (Comunità Europea)

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Le parti in plastica vanno conferite come tali.

Le parti in metallo vanno conferite come tali.

I medicinali ed il materiale sanitario utilizzato, deteriorato o scaduto vanno conferiti come tali o sostituiti (inviare richiesta).